

16 och 18 fr + 16, 20 och 22 fr

# Anastomos-läckage

## Niti-S MEGA + BETA

### MEGA


Indikationen för den heltäckta MEGA är läckage efter "gastric sleeve"-kirurgi. Längden och designen medger till att placera distala delen i duodenum och den proximala delen i mitten av esofagus. Stentet är mjukt och adapterar väl till anatomin. Väven är av Single type. Designen ger stentet en optimal radiell kraft och är täckt med silikon. Levereras med distal release. Röntgentäta markeringar 4-2-4.

### BETA

Designad för att användas vid anastomosläckage efter obesitaskirurgi, rough-en-y eller vid fistlar. Proximala delen ligger i esofagus och den distala delen i jejunum. Stentet är konstruerat med en väv som adapterar mycket väl till utmanande anatomi.

Beta har en väldigt speciell design med sina två extra lager väv utanpå täckningen. De extra skikten med väv finns till för att minimera risken för att stentet migrerar. Detta ger Beta en distinkt markerad midja som kommer i två längder, 5 mm eller 25 mm.

Gröna trådar i båda ändarna för repositionering av stentet eller avlägsnande. Röntgentäta markeringar 4-3-3-4. Distal ände – första extralager väv – andra extralager väv – proximal ände.

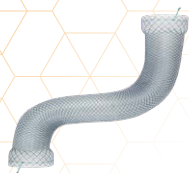

**Niti-S MEGA S-typ heltäckt  
med 2 trådar för borttagning**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2218Fr2	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
7-ES2223Fr2	22	23	20
7-ES2418Fr2	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
7-ES2423Fr2	24	23	22
7-ES2818Fr2	<b>28</b>	<b>18</b>	22
7-ES2823Fr2	28	23	22

**Niti-S MEGA S-typ heltäckt  
tråd för borttagning proximalt**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2218F	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
7-ES2223F	22	23	20
7-ES2418F	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
7-ES2423F	24	23	22
7-ES2818F	<b>28</b>	<b>18</b>	22
7-ES2823F	28	23	22



BETA 25 Distal release Leveranssystem 70 cm			
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK1806FNT2	18	6	20
7-EK1810FNT2	18	10	20
7-EK1812FNT2	18	12	20
7-EK1815FNT2	18	15	20
7-EK1816FNT2	18	16	20
7-EK1818FNT2	18	18	20
7-EK1820FNT2	18	20	20
7-EK2006FNT2	20	6	20
7-EK2010FNT2	20	10	20
7-EK2012FNT2	20	12	20
7-EK2015FNT2	20	15	20
7-EK2016FNT2	20	16	20
7-EK2018FNT2	20	18	20
7-EK2020FNT2	20	20	20
7-EK2206FNT2	22	6	20
7-EK2210FNT2	22	10	20
7-EK2212FNT2	22	12	20
7-EK2215FNT2	22	15	20
7-EK2216FNT2	22	16	20
7-EK2218FNT2	22	18	20
7-EK2220FNT2	22	20	20

BETA 25 Distal release Leveranssystem 70 cm			
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK2410FNT2	24	10	22
7-EK2412FNT2	24	12	22
7-EK2414FNT2	24	14	22
7-EK2415FNT2	24	15	22
7-EK2416FNT2	24	16	22
7-EK2418FNT2	24	17	22
7-EK2420FNT2	24	20	22
7-EK2610FNT2	26	10	22
7-EK2612FNT2	26	12	22
7-EK2614FNT2	26	14	22
7-EK2615FNT2	26	15	22
7-EK2616FNT2	26	16	22
7-EK2618FNT2	26	17	22
7-EK2620FNT2	26	20	22
7-EK2810FNT2	28	10	22
7-EK2812FNT2	28	12	22
7-EK2814FNT2	28	14	22
7-EK2815FNT2	28	15	22
7-EK2816FNT2	28	16	22
7-EK2818FNT2	28	17	22
7-EK2820FNT2	28	20	22



<b>BETA 5</b> Distal release Leveranssystem 70 cm			
Artikelnummer	Längd (cm)	Diameter (mm)	Profil (fr)
7-EK2214FND2	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>20</b>
7-EK2215FND2	22	15	20
7-EK2216FND2	22	16	20
7-EK2218FND2	22	18	20
7-EK2220FND2	22	20	20
7-EK2222FND2	22	22	20
7-EK2223FND2	22	23	20
7-EK2414FND2	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
7-EK2415FND2	24	15	22
7-EK2416FND2	24	16	22
7-EK2418FND2	24	18	22
7-EK2420FND2	24	20	22
7-EK2422FND2	24	22	22
7-EK2423FND2	24	23	22

<b>BETA 5</b> Distal release Leveranssystem 70 cm			
Artikelnummer	Längd (cm)	Diameter (mm)	Profil (fr)
7-EK2614FND2	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
7-EK2615FND2	26	15	22
7-EK2616FND2	26	16	22
7-EK2618FND2	26	18	22
7-EK2620FND2	26	20	22
7-EK2814FND2	28	14	22
7-EK2815FND2	28	15	22
7-EK2816FND2	28	16	22
7-EK2818FND2	28	18	22
7-EK2820FND2	28	20	22