


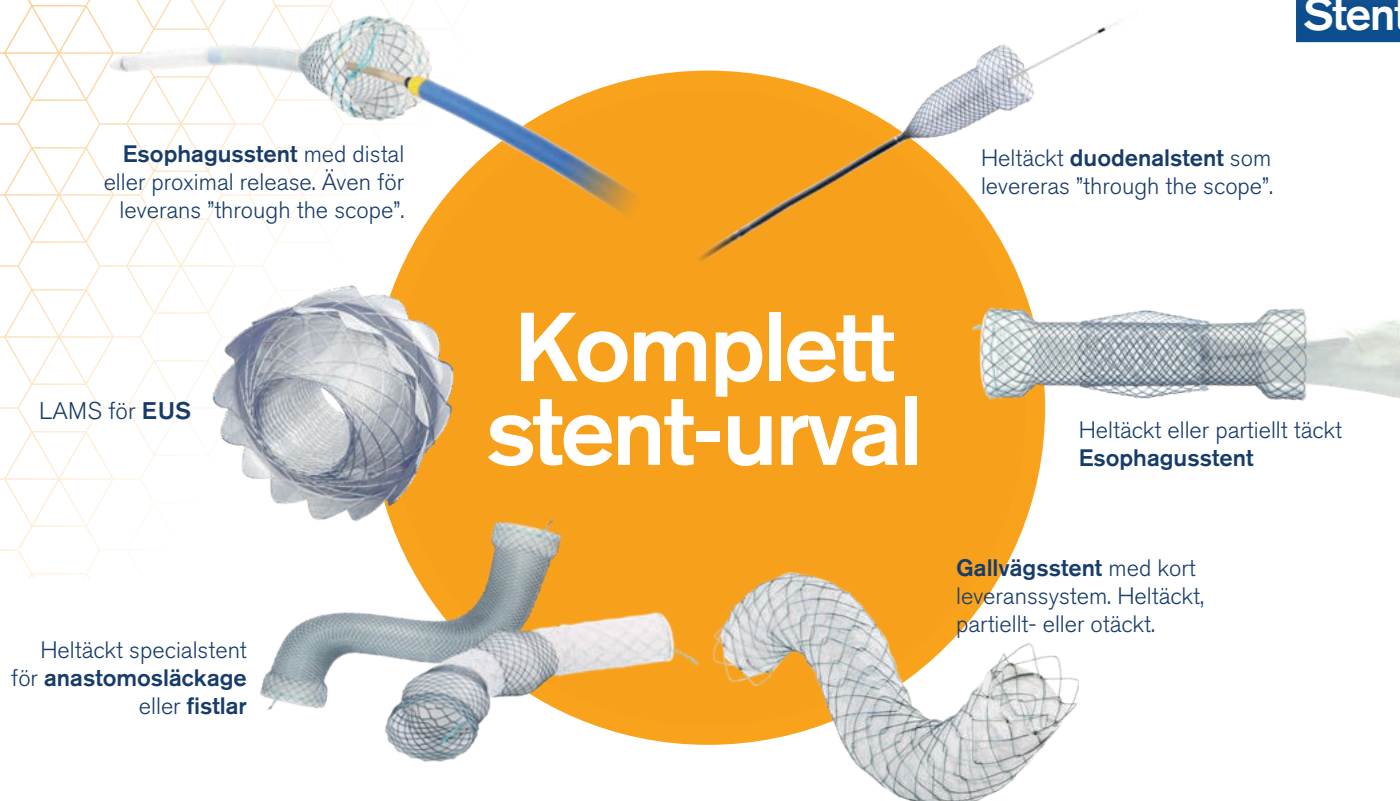

Stent för basala behov och kliniska utmaningar

Våra metallstent kommer med leveranssystem som är enkla och logiska att arbeta med. De finns med olika typer av väv eller täckning beroende på användningsområde.

Vi tillhandahåller stent för applikation via EUS, till exempel den senaste **HOT SPAXUS** bland annat för dränering av pancreascystor eller gallblåsan.

- Esophagus
- Duodenum
- Gallvägar
- EUS
- Colon

Esophagus

Niti-S CONIO

Niti-S DOUBLE

Niti-S DUAL & CERVICAL

Niti-S MEGA & BETA

Niti-S S TTS

Niti-S S

Duodenum

Niti-S COMVI

Niti-S S

Gallvägar

Niti-S BUMPY

Niti-S COMVI

Niti-S D

Niti-S LCD, KAFFES, FLARE

Niti-S M

Niti-S S

EUS

Niti-S HOT SPAXUS LAMS

Niti-S GIOBOR

Niti-S NAGI LAMS

Colon

COMVI/COMVI Flare


Es

Duo

Ga

EUS

Col

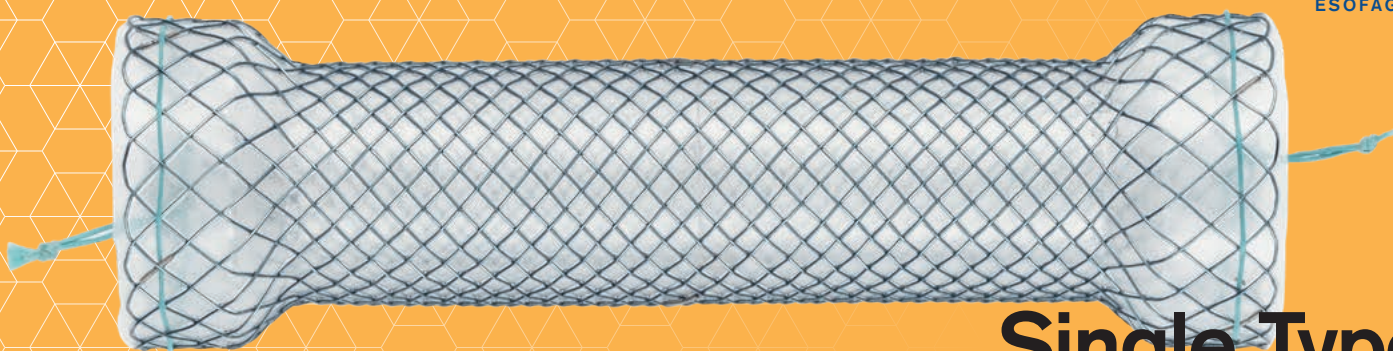

Single Type

16, 20 och 22 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S S

S står för **Single type** och är standardmodellen av våra esofagusstent. Kan användas vid såväl benign som malign indikation.

Stentet har en hög axiell kraft. Designen ger även stentet en hög radiell kraft. S-stentet är täckt med silikon. Kragarna i varje ände är 8 mm vidare än den centrala delen för att minimera risken för migration.

Stentet finns i två modeller för positionering genom distal release som proximal release via 2 olika leveranssystem.

Finns i heltäckt modell samt en partiellt täckt modell samt en heltäckt modell som har tråd för avlägsnande i båda ändarna.

Tydlig grön tråd för att förenkla avlägsnandet av stentet.

Röntgentäta markeringar 4-2-4.

Proximal release

Distal release





Niti-S S Heläckt
Esophagusstent med distal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES1606F	16	6	16
7-ES1608F	16	8	16
7-ES1610F	16	10	16
7-ES1612F	16	12	16
7-ES1614F	16	14	16
7-ES1615F	16	15	16
7-ES1806F	18	6	16
7-ES1808F	18	8	16
7-ES1810F	18	10	16
7-ES1812F	18	12	16
7-ES1814F	18	14	16
7-ES1815F	18	15	16
7-ES2006F	20	6	20
7-ES2008F	20	8	20
7-ES2010F	20	10	20
7-ES2012F	20	12	20
7-ES2014F	20	14	20
7-ES2015F	20	15	20
7-ES2206F	22	6	20
7-ES2208F	22	8	20
7-ES2210F	22	10	20
7-ES2212F	22	12	20
7-ES2214F	22	14	20
7-ES2215F	22	15	20

Niti-S S Heläckt
Esophagusstent med distal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2406F	24	6	22
7-ES2408F	24	8	22
7-ES2410F	24	10	22
7-ES2412F	24	12	22
7-ES2414F	24	14	22
7-ES2415F	24	15	22
7-ES2806F	28	6	22
7-ES2808F	28	8	22
7-ES2810F	28	10	22
7-ES2812F	28	12	22
7-ES2814F	28	14	22
7-ES2815F	28	15	22



Niti-S S heltäckt Esophagusstent med distal release

2 trådar för borttagande både distala och proximala änden
Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES1606FR2	16	6	16
7-ES1608FR2	16	8	16
7-ES1610FR2	16	10	16
7-ES1612FR2	16	12	16
7-ES1614FR2	16	14	16
7-ES1615FR2	16	15	16
7-ES1806FR2	18	6	16
7-ES1808FR2	18	8	16
7-ES1810FR2	18	10	16
7-ES1812FR2	18	12	16
7-ES1814FR2	18	14	16
7-ES1815FR2	18	15	16
7-ES2006FR2	20	6	20
7-ES2008FR2	20	8	20
7-ES2010FR2	20	10	20
7-ES2012FR2	20	12	20
7-ES2014FR2	20	14	20
7-ES2015FR2	20	15	20
7-ES2206FR2	22	6	20
7-ES2208FR2	22	8	20
7-ES2210FR2	22	10	20
7-ES2212FR2	22	12	20
7-ES2214FR2	22	14	20
7-ES2215FR2	22	15	20

Niti-S S heltäckt Esophagusstent med distal release

2 trådar för borttagande både distala och proximala änden
Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2406FR2	24	6	22
7-ES2408FR2	24	8	22
7-ES2410FR2	24	10	22
7-ES2412FR2	24	12	22
7-ES2414FR2	24	14	22
7-ES2415FR2	24	15	22
7-ES2806FR2	28	6	22
7-ES2808FR2	28	8	22
7-ES2810FR2	28	10	22
7-ES2812FR2	28	12	22
7-ES2814FR2	28	14	22
7-ES2815FR2	28	15	22



Niti-S S Partiellt täckt
Esophagusstent med distal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES1606B	16	6	16
7-ES1608B	16	8	16
7-ES1610B	16	10	16
7-ES1612B	16	12	16
7-ES1614B	16	14	16
7-ES1615B	16	15	16
7-ES1806B	18	6	16
7-ES1808B	18	8	16
7-ES1810B	18	10	16
7-ES1812B	18	12	16
7-ES1814B	18	14	16
7-ES1815B	18	15	16
7-ES2006B	20	6	20
7-ES2008B	20	8	20
7-ES2010B	20	10	20
7-ES2012B	20	12	20
7-ES2014B	20	14	20
7-ES2015B	20	15	20
7-ES2206B	22	6	20
7-ES2208B	22	8	20
7-ES2210B	22	10	20
7-ES2212B	22	12	20
7-ES2214B	22	14	20
7-ES2215B	22	15	20

Niti-S S Partiellt täckt
Esophagusstent med distal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2406B	24	6	22
7-ES2408B	24	8	22
7-ES2410B	24	10	22
7-ES2412B	24	12	22
7-ES2414B	24	14	22
7-ES2415B	24	15	22
7-ES2806B	28	6	22
7-ES2808B	28	8	22
7-ES2810B	28	10	22
7-ES2812B	28	12	22
7-ES2814B	28	14	22
7-ES2815B	28	15	22



Niti-S S heltäckt
Esofagusstent med proximal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606F	16	6	16
7-ESP1608F	16	8	16
7-ESP1610F	16	10	16
7-ESP1612F	16	12	16
7-ESP1614F	16	14	16
7-ESP1615F	16	15	16
7-ESP1806F	18	6	16
7-ESP1808F	18	8	16
7-ESP1810F	18	10	16
7-ESP1812F	18	12	16
7-ESP1814F	18	14	16
7-ESP1815F	18	15	16
7-ESP2006F	20	6	20
7-ESP2008F	20	8	20
7-ESP2010F	20	10	20
7-ESP2012F	20	12	20
7-ESP2014F	20	14	20
7-ESP2015F	20	15	20
7-ESP2206F	22	6	20
7-ESP2208F	22	8	20
7-ESP2210F	22	10	20
7-ESP2212F	22	12	20
7-ESP2214F	22	14	20
7-ESP2215F	22	15	20

Niti-S S heltäckt
Esofagusstent med proximal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP2406F	24	6	22
7-ESP2408F	24	8	22
7-ESP2410F	24	10	22
7-ESP2412F	24	12	22
7-ESP2414F	24	14	22
7-ESP2415F	24	15	22
7-ESP2806F	28	6	22
7-ESP2808F	28	8	22
7-ESP2810F	28	10	22
7-ESP2812F	28	12	22
7-ESP2814F	28	14	22
7-ESP2815F	28	15	22

**Niti-S S heltäckt****Esofagusstent med proximal release**

2 trådar för borttagande både distala och proximala änden

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606FR2	16	6	16
7-ESP1608FR2	16	8	16
7-ESP1610FR2	16	10	16
7-ESP1612FR2	16	12	16
7-ESP1614FR2	16	14	16
7-ESP1615FR2	16	15	16
7-ESP1806FR2	18	6	16
7-ESP1808FR2	18	8	16
7-ESP1810FR2	18	10	16
7-ESP1812FR2	18	12	16
7-ESP1814FR2	18	14	16
7-ESP1815FR2	18	15	16
7-ESP2006FR2	20	6	20
7-ESP2008FR2	20	8	20
7-ESP2010FR2	20	10	20
7-ESP2012FR2	20	12	20
7-ESP2014FR2	20	14	20
7-ESP2015FR2	20	15	20
7-ESP2206FR2	22	6	20
7-ESP2208FR2	22	8	20
7-ESP2210FR2	22	10	20
7-ESP2212FR2	22	12	20
7-ESP2214FR2	22	14	20
7-ESP2215FR2	22	15	20

Niti-S S heltäckt**Esofagusstent med proximal release**

2 trådar för borttagande både distala och proximala änden

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP2406FR2	24	6	22
7-ESP2408FR2	24	8	22
7-ESP2410FR2	24	10	22
7-ESP2412FR2	24	12	22
7-ESP2414FR2	24	14	22
7-ESP2415FR2	24	15	22
7-ESP2806FR2	28	6	22
7-ESP2808FR2	28	8	22
7-ESP2810FR2	28	10	22
7-ESP2812FR2	28	12	22
7-ESP2814FR2	28	14	22
7-ESP2815FR2	28	15	22



Niti-S S Partiellt täckt
Esofagusstent med proximal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606B	16	6	16
7-ESP1608B	16	8	16
7-ESP1610B	16	10	16
7-ESP1612B	16	12	16
7-ESP1614B	16	14	16
7-ESP1615B	16	15	16
7-ESP1806B	18	6	16
7-ESP1808B	18	8	16
7-ESP1810B	18	10	16
7-ESP1812B	18	12	16
7-ESP1814B	18	14	16
7-ESP1815B	18	15	16
7-ESP2006B	20	6	20
7-ESP2008B	20	8	20
7-ESP2010B	20	10	20
7-ESP2012B	20	12	20
7-ESP2014B	20	14	20
7-ESP2015B	20	15	20
7-ESP2206B	22	6	20
7-ESP2208B	22	8	20
7-ESP2210B	22	10	20
7-ESP2212B	22	12	20
7-ESP2214B	22	14	20
7-ESP2215B	22	15	20

Niti-S S Partiellt täckt
Esofagusstent med proximal release
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP2406B	24	6	22
7-ESP2408B	24	8	22
7-ESP2410B	24	10	22
7-ESP2412B	24	12	22
7-ESP2414B	24	14	22
7-ESP2415B	24	15	22
7-ESP2806B	28	6	22
7-ESP2808B	28	8	22
7-ESP2810B	28	10	22
7-ESP2812B	28	12	22
7-ESP2814B	28	14	22
7-ESP2815B	28	15	22



Single Type

10,5 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S S-TTS

S-TTS är vår modell av S stentet för applikation genom endoskopet. S står för Single type och är standardmodellen av våra esofagusstent.


Kan användas vid såväl benign som malign indikation. Stentet har en hög axiell kraft. Designen ger stentet en hög radiell kraft. S-stentet är täckt med silikon. Kragarna i varje ända är 8mm vidare än den centrala delen för att minimera risken för migration.

Finns i heltäckt modell samt en partiellt täckt modell samt en heltäckt modell som har tråd för borttagning i båda ändarna. Med TTS levereras stentet via distal release.

Tydlig grön tråd för att förenkla avlägsnandet av stentet.

Röntgentäta markeringar 4-2-4.

Stentet finns med olika längder hos leveranssystemet. 160 cm är standard och är den modell som lagerförs. Vid behov kan även 180 cm eller 220 cm beställas.

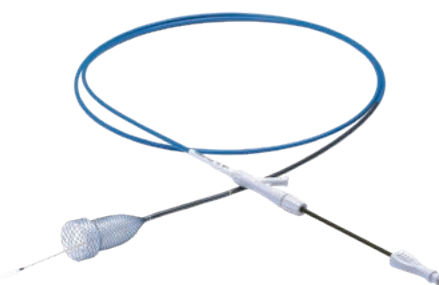

Genom skopet, distal release


S Heltäckt TTS
Genom skopet, distal release

Leveranssystem 10,5 Fr, 160 cm


Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-EST1606F	16	6
7-EST1608F	16	8
7-EST1610F	16	10
7-EST1612F	16	12
7-EST1614F	16	14
7-EST1615F	16	15
7-EST1806F	18	6
7-EST1808F	18	8
7-EST1810F	18	10
7-EST1812F	18	12
7-EST1814F	18	14
7-EST1815F	18	15
7-EST2006F	20	6
7-EST2008F	20	8
7-EST2010F	20	10
7-EST2012F	20	12
7-EST2014F	20	14
7-EST2015F	20	15
7-EST2206F	22	6
7-EST2208F	22	8
7-EST2210F	22	10
7-EST2212F	22	12
7-EST2214F	22	14
7-EST2215F	22	15

S TTS partiellt täckt

Tråd för borttagande på proximala sidan

Leveranssystem 10,5 Fr, 160 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-EST1606B	16	6
7-EST1608B	16	8
7-EST1610B	16	10
7-EST1612B	16	12
7-EST1614B	16	14
7-EST1615B	16	15
7-EST1806B	18	6
7-EST1808B	18	8
7-EST1810B	18	10
7-EST1812B	18	12
7-EST1814B	18	14
7-EST1815B	18	15
7-EST2006B	20	6
7-EST2008B	20	8
7-EST2010B	20	10
7-EST2012B	20	12
7-EST2014B	20	14
7-EST2015B	20	15
7-EST2206B	22	6
7-EST2208B	22	8
7-EST2210B	22	10
7-EST2212B	22	12
7-EST2214B	22	14
7-EST2215B	22	15

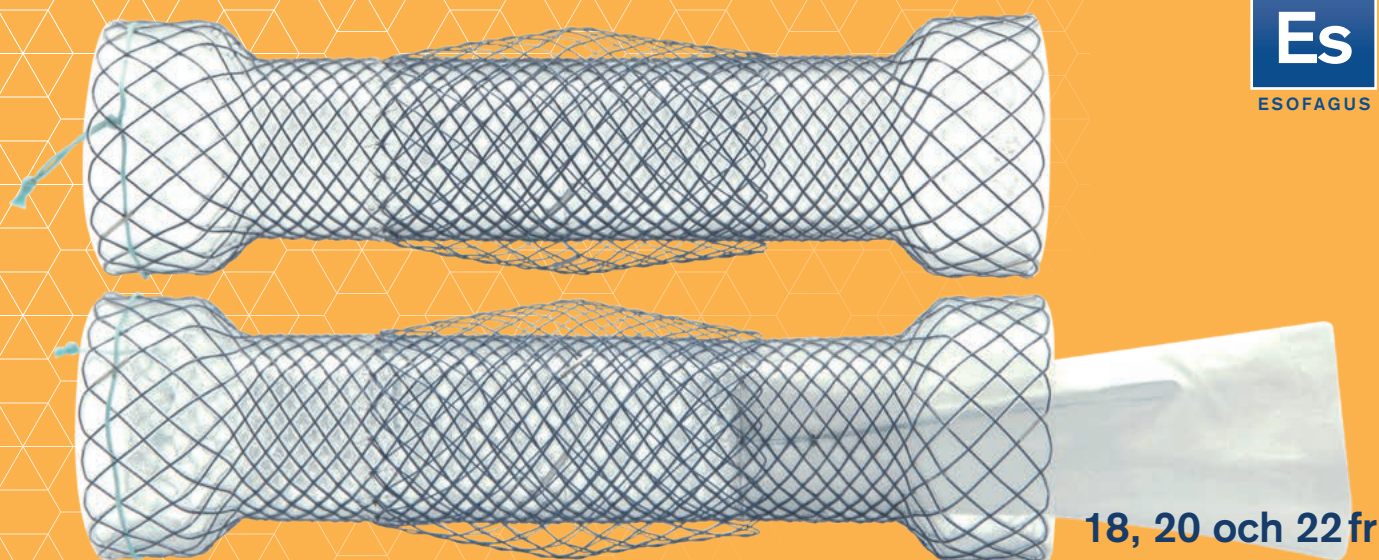

Maligna strikturer

Niti-S DOUBLE

Delat blad mellan DOUBLE och DOUBLE anti reflux

DOUBLE är ett täckt stent för malign indikation.


Det speciella med DOUBLE är det extra nät som sitter centralt på stentets utsida. Vävnad växer in i denna del och säkerställer att stentet sitter på plats samtidigt som silikon-täckningen förhindrar vävnadsinväxt.

Kragarna i varje ända är 8 mm vidare än den centrala delen för att ytterligare minimera risken för migration. Stentet finns både för positionering genom distal som proximal release via 2 olika leveranssystem.

Grön tråd för avlägsnande. Röntgentäta markeringar 4-2-4.

DOUBLE – Anti reflux

DOUBLE är täckt stent för malign indikation. Denna modell av DOUBLE har en antireflux ventil i distala delen. I övrigt är stentet detsamma som DOUBLE.

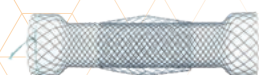**Niti-S Double heltäckt****Proximal release**


Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606FD	16	6	16
7-ESP1608FD	16	8	16
7-ESP1610FD	16	10	16
7-ESP1612FD	16	12	16
7-ESP1614FD	16	14	16
7-ESP1615FD	16	15	16
7-ESP1806FD	18	6	16
7-ESP1808FD	18	8	16
7-ESP1810FD	18	10	16
7-ESP1812FD	18	12	16
7-ESP1814FD	18	14	16
7-ESP1815FD	18	15	16
7-ESP2006FD	20	6	20
7-ESP2008FD	20	8	20
7-ESP2010FD	20	10	20
7-ESP2012FD	20	12	20
7-ESP2014FD	20	14	20
7-ESP2015FD	20	15	20
7-ESP2206FD	22	6	20
7-ESP2208FD	22	8	20
7-ESP2210FD	22	10	20
7-ESP2212FD	22	12	20
7-ESP2214FD	22	14	20
7-ESP2215FD	22	15	20

Niti-S Double heltäckt**Proximal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP2406FD	24	6	22
7-ESP2408FD	24	8	22
7-ESP2410FD	24	10	22
7-ESP2412FD	24	12	22
7-ESP2414FD	24	14	22
7-ESP2415FD	24	15	22
7-ESP2806FD	28	6	22
7-ESP2808FD	28	8	22
7-ESP2810FD	28	10	22
7-ESP2812FD	28	12	22
7-ESP2814FD	28	14	22
7-ESP2815FD	28	15	22

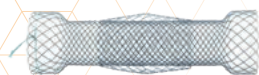**Niti-S Double heltäckt****Distalrelease**


Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES1606FD	16	6	16
7-ES1608FD	16	8	16
7-ES1610FD	16	10	16
7-ES1612FD	16	12	16
7-ES1614FD	16	14	16
7-ES1615FD	16	15	16
7-ES1806FD	18	6	16
7-ES1808FD	18	8	16
7-ES1810FD	18	10	16
7-ES1812FD	18	12	16
7-ES1814FD	18	14	16
7-ES1815FD	18	15	16
7-ES2006FD	20	6	20
7-ES2008FD	20	8	20
7-ES2010FD	20	10	20
7-ES2012FD	20	12	20
7-ES2014FD	20	14	20
7-ES2015FD	20	15	20
7-ES2206FD	22	6	20
7-ES2208FD	22	8	20
7-ES2210FD	22	10	20
7-ES2212FD	22	12	20
7-ES2214FD	22	14	20
7-ES2215FD	22	15	20

Niti-S Double heltäckt**Distalrelease**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2406FD	24	6	22
7-ES2408FD	24	8	22
7-ES2410FD	24	10	22
7-ES2412FD	24	12	22
7-ES2414FD	24	14	22
7-ES2415FD	24	15	22
7-ES2806FD	28	6	22
7-ES2808FD	28	8	22
7-ES2810FD	28	10	22
7-ES2812FD	28	12	22
7-ES2814FD	28	14	22
7-ES2815FD	28	15	22

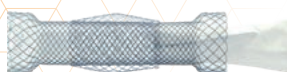**Niti-S Double Antireflux heltäckt****Distalrelease**


Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EA1606FD	16	6	16
7-EA1608FD	16	8	16
7-EA1610FD	16	10	16
7-EA1612FD	16	12	16
7-EA1614FD	16	14	16
7-EA1615FD	16	15	16
7-EA1806FD	18	6	16
7-EA1808FD	18	8	16
7-EA1810FD	18	10	16
7-EA1812FD	18	12	16
7-EA1814FD	18	14	16
7-EA1815FD	18	15	16
7-EA2006FD	20	6	20
7-EA2008FD	20	8	20
7-EA2010FD	20	10	20
7-EA2012FD	20	12	20
7-EA2014FD	20	14	20
7-EA2015FD	20	15	20
7-EA2206FD	22	6	20
7-EA2208FD	22	8	20
7-EA2210FD	22	10	20
7-EA2212FD	22	12	20
7-EA2214FD	22	14	20
7-EA2215FD	22	15	20

Niti-S Double Antireflux heltäckt**Distalrelease**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EA2406FD	24	6	22
7-EA2408FD	24	8	22
7-EA2410FD	24	10	22
7-EA2412FD	24	12	22
7-EA2414FD	24	14	22
7-EA2415FD	24	15	22
7-EA2806FD	28	6	22
7-EA2808FD	28	8	22
7-EA2810FD	28	10	22
7-EA2812FD	28	12	22
7-EA2814FD	28	14	22
7-EA2815FD	28	15	22

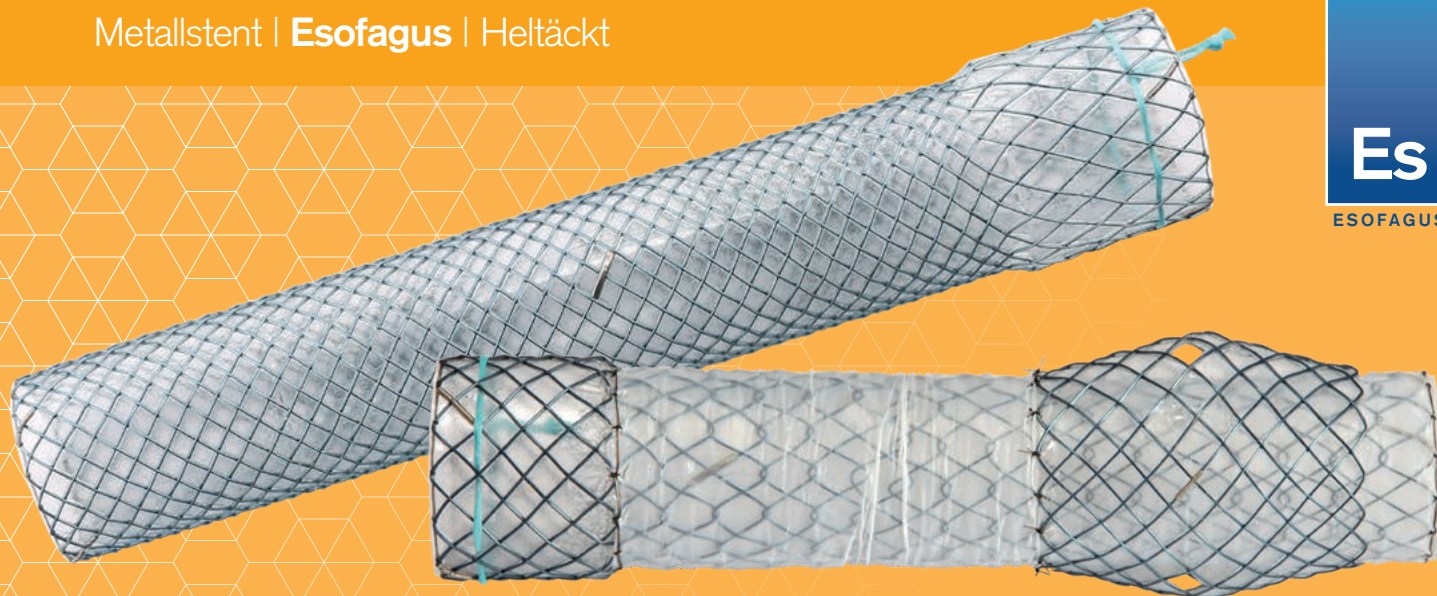

12, 14, 16 och 18 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S CONIO

CONIO

Designad för att användas vid strikturer i proximala esophagus. Stentet kom till utifrån behovet att stenta refraktära hypopharyngeala strikturer efter behandling av larynxcancer. Stentet är täckt för att minska risken för inväxt. Har röntgenmarkeringar 4-2-4 (ände-mitt-ände).


CONIO II

För benigna och maligna strikturer i mellersta och övre delarna av esophagus. Stentet har en speciell uppbyggnad med två olika typer av täckning samt extra metallväv.

Proximala delen har en silikontäckning samt en krage som är 2 mm större än stentets centrala del.

Den centrala delen har ett teflonmembran för att förebygga stentrelaterade komplikationer.

Den nedre delen har en extra del av metallväv som ligger mot slemhinnan. Denna del är 6 mm vidare än centrala delen för att motverka migration. Innanför är stentet täckt.

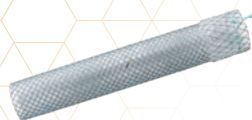**Niti-S CONIO heltäckt****Distalrelease**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES1606FN	10	6	12
7-ES1606FN	10	8	12
7-ES1606FN	10	10	12
7-ES1606FN	10	12	12
7-ES1606FN	10	14	12
7-ES1606FN	10	15	12
7-ES1606FN	12	6	12
7-ES1606FN	12	8	12
7-ES1606FN	12	10	12
7-ES1212FN	12	12	12
7-ES1214FN	12	14	12
7-ES1215FN	12	15	12
7-ES1406FN	14	6	14
7-ES1408FN	14	8	14
7-ES1410FN	14	10	14
7-ES1412FN	14	12	14
7-ES1414FN	14	14	14
7-ES1415FN	14	15	14
7-ES1606FN	16	6	16
7-ES1608FN	16	8	16
7-ES1610FN	16	10	16
7-ES1612FN	16	12	16
7-ES1614FN	16	14	16
7-ES1615FN	16	15	16

Niti-S CONIO heltäckt**Proximal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606FN	10	6	12
7-ESP1008FN	10	8	12
7-ESP1010FN	10	10	12
7-ESP1012FN	10	12	12
7-ESP1014FN	10	14	12
7-ESP1015FN	10	15	12
7-ESP1206FN	12	6	12
7-ESP1208FN	12	8	12
7-ESP1210FN	12	10	12
7-ESP1212FN	12	12	12
7-ESP1214FN	12	14	12
7-ESP1215FN	12	15	12
7-ESP1406FN	14	6	14
7-ESP1408FN	14	8	14
7-ESP1410FN	14	10	14
7-ESP1412FN	14	12	14
7-ESP1414FN	14	14	14
7-ESP1415FN	14	15	14
7-ESP1606FN	16	6	16
7-ESP1608FN	16	8	16
7-ESP1610FN	16	10	16
7-ESP1612FN	16	12	16
7-ESP1614FN	16	14	16
7-ESP1615FN	16	15	16



Niti-S CONIO II Heltäckt
med distal bumper
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK1008FN	10	8	14
7-EK1010FN	10	10	14
7-EK1012FN	10	12	14
7-EK1208FN	12	8	16
7-EK1210FN	12	10	16
7-EK1212FN	12	12	16
7-EK1408FN	14	8	16
7-EK1410FN	14	10	16
7-EK1412FN	14	12	16
7-EK1608FN	16	8	18
7-EK1610FN	16	10	18
7-EK1612FN	16	12	18



16 och 18fr + 16, 20 och 22fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S DUAL + CERVICAL

DUAL

För benigna och maligna strikturer. Har skonsam radiell kraft vilket ska göra den mindre smärtsam att bära. Stentet formar sig väl till anatomin. De dubbla lagren av D-väv ger stentet en minimal förkortning vid placering.


Finns tillgänglig för distal release över ledare.

Röntgentäta markeringar 4-2-4.

CERVICAL

Är designad för att användas vid strikturer i proximala esophagus. Stentet har en design som ska underlätta placering nära den övre esophagus sfinktern. Den proximala kragen endast är 5 mm och den distala kragen är 15 mm. Stentet kommer med proximal release men är även möjlig att få med distal release.

Röntgentäta markeringar 4-2-4.

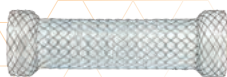


Niti-S Dual, heltäckt
 för benigna och maligna strikturer
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK1806F	18	6	16
7-EK1808F	18	8	16
7-EK1810F	18	10	16
7-EK1812F	18	12	16
7-EK1814F	18	14	16
7-EK1815F	18	15	16
7-EK1818F	18	18	16
7-EK1820F	18	20	16
7-EK2006F	20	6	18
7-EK2008F	20	8	18
7-EK2010F	20	10	18
7-EK2012F	20	12	18
7-EK2014F	20	14	18
7-EK2015F	20	15	18
7-EK2018F	20	18	18
7-EK2020F	20	20	18
7-EK2206F	22	6	18
7-EK2208F	22	8	18
7-EK2210F	22	10	18
7-EK2212F	22	12	18
7-EK2214F	22	14	18
7-EK2215F	22	15	18
7-EK2218F	22	18	18

Niti-S Dual, heltäckt
 för benigna och maligna strikturer
 Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK2406F	24	6	18
7-EK2408F	24	8	18
7-EK2410F	24	10	18
7-EK2412F	24	12	18
7-EK2414F	24	14	18
7-EK2415F	24	15	18
7-EK2806F	28	6	18
7-EK2808F	28	8	18
7-EK2810F	28	10	18
7-EK2812F	28	12	18
7-EK2814F	28	14	18
7-EK2815F	28	15	18

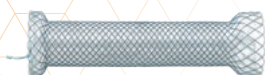**Niti-S CERVICAL Heltäckt****Proximal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP1606FV	16	6	16
7-ESP1608FV	16	8	16
7-ESP1610FV	16	10	16
7-ESP1612FV	16	12	16
7-ESP1614FV	16	14	16
7-ESP1615FV	16	15	16
7-ESP1806FV	18	6	16
7-ESP1808FV	18	8	16
7-ESP1810FV	18	10	16
7-ESP1812FV	18	12	16
7-ESP1814FV	18	14	16
7-ESP1815FV	18	15	16
7-ESP2006FV	20	6	20
7-ESP2008FV	20	8	20
7-ESP2010FV	20	10	20
7-ESP2012FV	20	12	20
7-ESP2014FV	20	14	20
7-ESP2015FV	20	15	20
7-ESP2206FV	22	6	20
7-ESP2208FV	22	8	20
7-ESP2210FV	22	10	20
7-ESP2212FV	22	12	20
7-ESP2214FV	22	14	20
7-ESP2215FV	22	15	20

Niti-S CERVICAL Heltäckt**Proximal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ESP2406FV	24	6	22
7-ESP2408FV	24	8	22
7-ESP2410FV	24	10	22
7-ESP2412FV	24	12	22
7-ESP2414FV	24	14	22
7-ESP2415FV	24	15	22
7-ESP2806FV	28	6	22
7-ESP2808FV	28	8	22
7-ESP2810FV	28	10	22
7-ESP2812FV	28	12	22
7-ESP2814FV	28	14	22
7-ESP2815FV	28	15	22



16 och 18 fr + 16, 20 och 22 fr

Anastomos-läckage

Niti-S **MEGA** + **BETA**

MEGA

Indikationen för den heltäckta MEGA är läckage efter "gastric sleeve"-kirurgi. Längden och designen medger till att placera distala delen i duodenum och den proximala delen i mitten av esofagus. Stentet är mjukt och adapterar väl till anatomin. Väven är av Single type. Designen ger stentet en optimal radiell kraft och är täckt med silikon. Levereras med distal release. Röntgentäta markeringar 4-2-4.

BETA

Designad för att användas vid anastomosläckage efter obesitaskirurgi, rough-en-y eller vid fistlar. Proximala delen ligger i esofagus och den distala delen i jejunum. Stentet är konstruerat med en väv som adapterar mycket väl till utmanande anatomi.

Beta har en väldigt speciell design med sina två extra lager väv utanpå täckningen. De extra skikten med väv finns till för att minimera risken för att stentet migrerar. Detta ger Beta en distinkt markerad midja som kommer i två längder, 5 mm eller 25 mm.

Gröna trådar i båda ändarna för repositionering av stentet eller avlägsnande. Röntgentäta markeringar 4-3-3-4. Distal ände – första extralager väv – andra extralager väv – proximal ände.


**Niti-S MEGA S-typ heltäckt
med 2 trådar för borttagning**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2218Fr2	22	18	20
7-ES2223Fr2	22	23	20
7-ES2418Fr2	24	18	22
7-ES2423Fr2	24	23	22
7-ES2818Fr2	28	18	22
7-ES2823Fr2	28	23	22

**Niti-S MEGA S-typ heltäckt
tråd för borttagning proximalt**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-ES2218F	22	18	20
7-ES2223F	22	23	20
7-ES2418F	24	18	22
7-ES2423F	24	23	22
7-ES2818F	28	18	22
7-ES2823F	28	23	22

**BETA 25****Distal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK1806FNT2	18	6	20
7-EK1810FNT2	18	10	20
7-EK1812FNT2	18	12	20
7-EK1815FNT2	18	15	20
7-EK1816FNT2	18	16	20
7-EK1818FNT2	18	18	20
7-EK1820FNT2	18	20	20
7-EK2006FNT2	20	6	20
7-EK2010FNT2	20	10	20
7-EK2012FNT2	20	12	20
7-EK2015FNT2	20	15	20
7-EK2016FNT2	20	16	20
7-EK2018FNT2	20	18	20
7-EK2020FNT2	20	20	20
7-EK2206FNT2	22	6	20
7-EK2210FNT2	22	10	20
7-EK2212FNT2	22	12	20
7-EK2215FNT2	22	15	20
7-EK2216FNT2	22	16	20
7-EK2218FNT2	22	18	20
7-EK2220FNT2	22	20	20

BETA 25**Distal release**

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-EK2410FNT2	24	10	22
7-EK2412FNT2	24	12	22
7-EK2414FNT2	24	14	22
7-EK2415FNT2	24	15	22
7-EK2416FNT2	24	16	22
7-EK2418FNT2	24	17	22
7-EK2420FNT2	24	20	22
7-EK2610FNT2	26	10	22
7-EK2612FNT2	26	12	22
7-EK2614FNT2	26	14	22
7-EK2615FNT2	26	15	22
7-EK2616FNT2	26	16	22
7-EK2618FNT2	26	17	22
7-EK2620FNT2	26	20	22
7-EK2810FNT2	28	10	22
7-EK2812FNT2	28	12	22
7-EK2814FNT2	28	14	22
7-EK2815FNT2	28	15	22
7-EK2816FNT2	28	16	22
7-EK2818FNT2	28	17	22
7-EK2820FNT2	28	20	22


BETA 5
 Distal release

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Längd (cm)	Diameter (mm)	Profil (fr)
7-EK2214FND2	22	14	20
7-EK2215FND2	22	15	20
7-EK2216FND2	22	16	20
7-EK2218FND2	22	18	20
7-EK2220FND2	22	20	20
7-EK2222FND2	22	22	20
7-EK2223FND2	22	23	20
7-EK2414FND2	24	14	22
7-EK2415FND2	24	15	22
7-EK2416FND2	24	16	22
7-EK2418FND2	24	18	22
7-EK2420FND2	24	20	22
7-EK2422FND2	24	22	22
7-EK2423FND2	24	23	22

BETA 5
 Distal release

Leveranssystem 70 cm

Artikelnummer	Längd (cm)	Diameter (mm)	Profil (fr)
7-EK2614FND2	26	14	22
7-EK2615FND2	26	15	22
7-EK2616FND2	26	16	22
7-EK2618FND2	26	18	22
7-EK2620FND2	26	20	22
7-EK2814FND2	28	14	22
7-EK2815FND2	28	15	22
7-EK2816FND2	28	16	22
7-EK2818FND2	28	18	22
7-EK2820FND2	28	20	22

Obstruktion

10,5–28 fr

För malign obstruktion vid ventrikelns avflöde

Niti-S COMVI

Vårt COMVI-stent har en speciell konstruktion med sina tre lager. Mellan de två lagren av metallväv ligger ett teflonmembran för att förhindra vävnadsinväxt.


Det speciella med COMVI är smidigheten och flexibiliteten när högre krav ställs på anpassning till anatomin.


De två skikten med väv gör att stentet håller en hög radiell kraft. Designen ger en minimal förkortning mellan stentets längd på leveranssystemet och när det ligger på plats i duodenum.

Stentet är partiellt täckt där båda ändarna är otäckt.

Vårt leveranssystem till TTS kommer i 220 cm längd samt 10,5 fr.


De 4 röntgentäta markeringarna sitter där den täckta delen övergår i otäckt i vardera ände.

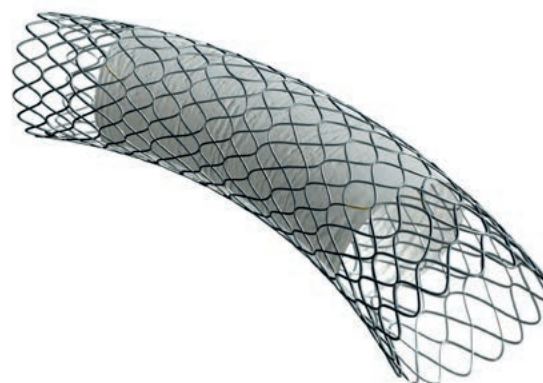


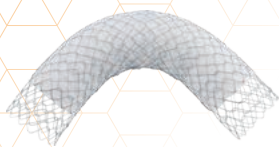**Niti-S COMVI Partiellt täckt****Through the Scope**

Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PCT1806BA-22	18	6	10,5
7-PCT1808BA-22	18	8	10,5
7-PCT1810BA-22	18	10	10,5
7-PCT1812BA-22	18	12	10,5
7-PCT1814BA-22	18	14	10,5
7-PCT1815BA-22	18	15	10,5
7-PCT2006BA-22	20	6	10,5
7-PCT2008BA-22	20	8	10,5
7-PCT2010BA-22	20	10	10,5
7-PCT2012BA-22	20	12	10,5
7-PCT2014BA-22	20	14	10,5
7-PCT2015BA-22	20	15	10,5
7-PCT2206BA-22	22	6	10,5
7-PCT2208BA-22	22	8	10,5
7-PCT2210BA-22	22	10	10,5
7-PCT2212BA-22	22	12	10,5
7-PCT2214BA-22	22	14	10,5
7-PCT2215BA-22	22	15	10,5

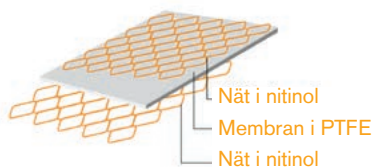

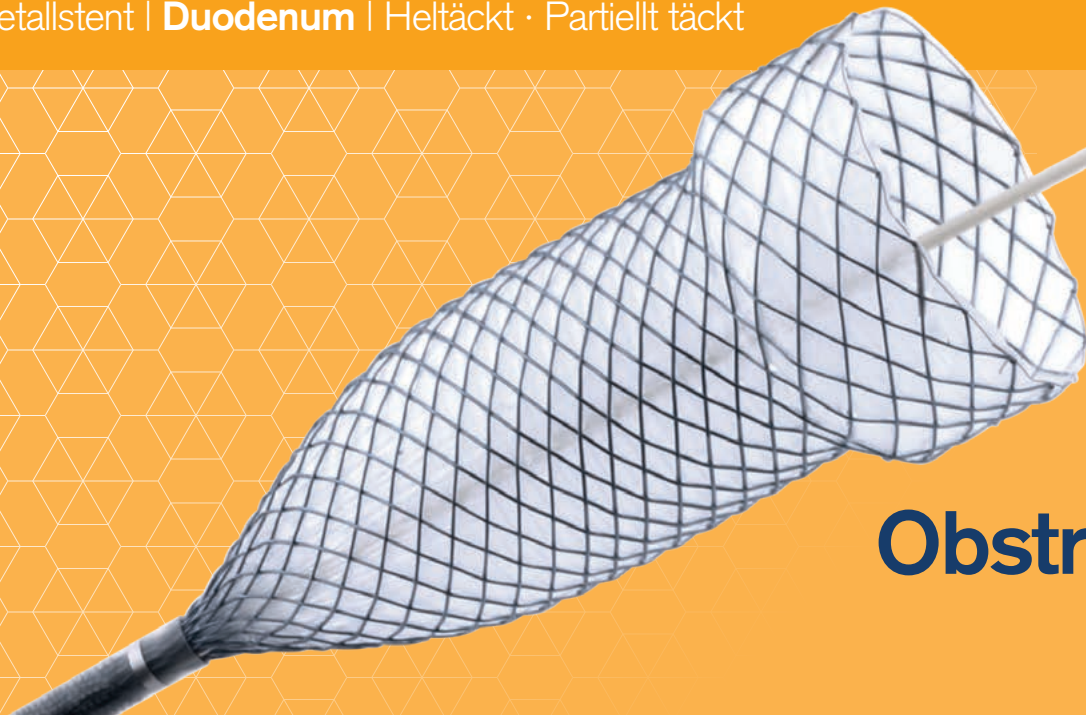

Obstruktion

10fr

För benign och malign obstruktion vid ventrikels avflöde

Niti-S Duodenal S

Med vårt S-stent finns möjligheten att arbeta med ett täckt duodenalstent som kan appliceras över ledare eller som TTS (Through The Scope). Stentet kommer i versioner som heltäckt eller partiellt täckt, där båda ändarna är otäckt.


Vårt S-stent har en hög radiell kraft samtidigt som det är flexibelt.

Leveranssystemet till TTS kommer i 220 cm längd samt 10,5 fr. Det kan även beställas i 120 cm som 180 cm längd. För användande över ledare kommer leveranssystemet i 135 cm längd.

I vardera ände är stentet avrundat för att vara skonsamt och minimera risken för vävnadshyerplasi och inväxt.

Stentet har en grön tråd för att förenkla borttagande.

Röntgentäta markeringar: 4 i vardera ände samt 2 i mitten.

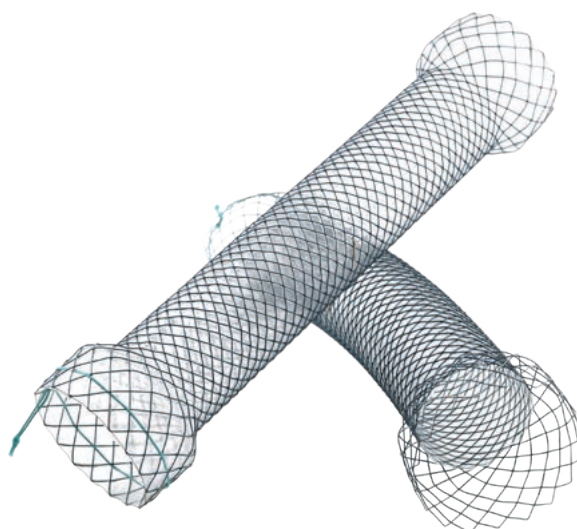

Niti-S S Heltäckt
Through the Scope
Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PST1806F-22	18	6	10,5
7-PST1808F-22	18	8	10,5
7-PST1810F-22	18	10	10,5
7-PST1812F-22	18	12	10,5
7-PST1814F-22	18	14	10,5
7-PST1815F-22	18	15	10,5
7-PST2006F-22	20	6	10,5
7-PST2008F-22	20	8	10,5
7-PST2010F-22	20	10	10,5
7-PST2012F-22	20	12	10,5
7-PST2014F-22	20	14	10,5
7-PST2015F-22	20	15	10,5
7-PST2206F-22	22	6	10,5
7-PST2208F-22	22	8	10,5
7-PST2210F-22	22	10	10,5
7-PST2212F-22	22	12	10,5
7-PST2214F-22	22	14	10,5
7-PST2215F-22	22	15	10,5

Niti-S S Partiellt täckt
Through the Scope
Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PST1806B-22	18	6	10,5
7-PST1808B-22	18	8	10,5
7-PST1810B-22	18	10	10,5
7-PST1812B-22	18	12	10,5
7-PST1814B-22	18	14	10,5
7-PST1815B-22	18	15	10,5
7-PST2006B-22	20	6	10,5
7-PST2008B-22	20	8	10,5
7-PST2010B-22	20	10	10,5
7-PST2012B-22	20	12	10,5
7-PST2014B-22	20	14	10,5
7-PST2015B-22	20	15	10,5
7-PST2206B-22	22	6	10,5
7-PST2208B-22	22	8	10,5
7-PST2210B-22	22	10	10,5
7-PST2212B-22	22	12	10,5
7-PST2214B-22	22	14	10,5
7-PST2215B-22	22	15	10,5

Niti-S S Heltäckt**Över ledare**

Leveranssystem 135 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS1806F	18	6	16
7-PS1808F	18	8	16
7-PS1810F	18	10	16
7-PS1812F	18	12	16
7-PS1814F	18	14	16
7-PS1815F	18	15	16
7-PS2006F	20	6	16
7-PS2008F	20	8	16
7-PS2010F	20	10	16
7-PS2012F	20	12	16
7-PS2014F	20	14	16
7-PS2015F	20	15	16
7-PS2206F	22	6	20
7-PS2208F	22	8	20
7-PS2210F	22	10	20
7-PS2212F	22	12	20
7-PS2214F	22	14	20
7-PS2215F	22	15	20
7-PS2406F	24	6	22
7-PS2408F	24	8	22
7-PS2410F	24	10	22
7-PS2412F	24	12	22
7-PS2414F	24	14	22
7-PS2415F	24	15	22

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS2606F	26	6	22
7-PS2608F	26	8	22
7-PS2610F	26	10	22
7-PS2612F	26	12	22
7-PS2614F	26	14	22
7-PS2615F	26	15	22
7-PS2806F	28	6	22
7-PS2808F	28	8	22
7-PS2810F	28	10	22
7-PS2812F	28	12	22
7-PS2814F	28	14	22
7-PS2815F	28	15	22

Niti-S S Partiellt täckt**Över ledare**

Leveranssystem 135 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS1806B	18	6	16
7-PS1808B	18	8	16
7-PS1810B	18	10	16
7-PS1812B	18	12	16
7-PS1814B	18	14	16
7-PS1815B	18	15	16
7-PS2006B	20	6	16
7-PS2008B	20	8	16
7-PS2010B	20	10	16
7-PS2012B	20	12	16
7-PS2014B	20	14	16
7-PS2015B	20	15	16
7-PS2206B	22	6	20
7-PS2208B	22	8	20
7-PS2210B	22	10	20
7-PS2212B	22	12	20
7-PS2214B	22	14	20
7-PS2215B	22	15	20
7-PS2406B	24	6	22
7-PS2408B	24	8	22
7-PS2410B	24	10	22
7-PS2412B	24	12	22
7-PS2414B	24	14	22
7-PS2415B	24	15	22

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-PS2606B	26	6	22
7-PS2608B	26	8	22
7-PS2610B	26	10	22
7-PS2612B	26	12	22
7-PS2614B	26	14	22
7-PS2615B	26	15	22
7-PS2806B	28	6	22
7-PS2808B	28	8	22
7-PS2810B	28	10	22
7-PS2812B	28	12	22
7-PS2814B	28	14	22
7-PS2815B	28	15	22

Single Type

8,5 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S S

S står för Single type. Konstruktionen ger stentet en hög axiell kraft. Stentet är mjukt avrundat i respektive kant vilket gör S-stentet atraumatiskt. Något som ger mindre vävnadshyperplasi runt kanterna.

Finns att tillgå som heltäckt och otäckt. Samt som partiellt täckt där 5 mm av respektive ände är otäckt. Standardmodellen är heltäckt med silikontäckning.


Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande.

För kort system finns även att beställa till långt system.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.



Leveranssystem "gallväg kort system".

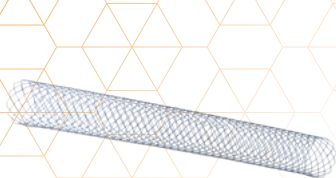

Niti-S S Otäckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm		
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BM0604	6	4
7-BM0605	6	5
7-BM0606	6	6
7-BM0607	6	7
7-BM0608	6	8
7-BM0609	6	9
7-BM0610	6	10
7-BM0612	6	12
7-BM0804	8	4
7-BM0805	8	5
7-BM0806	8	6
7-BM0807	8	7
7-BM0808	8	8
7-BM0809	8	9
7-BM0810	8	10
7-BM0812	8	12
7-BM1004	10	4
7-BM1005	10	5
7-BM1006	10	6
7-BM1007	10	7
7-BM1008	10	8
7-BM1009	10	9
7-BM1010	10	10
7-BM1012	10	12

Niti-S S Heltäckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm		
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BSM0604F	6	4
7-BSM0605F	6	5
7-BSM0606F	6	6
7-BSM0607F	6	7
7-BSM0608F	6	8
7-BSM0609F	6	9
7-BSM0610F	6	10
7-BSM0612F	6	12
7-BSM0804F	8	4
7-BSM0805F	8	5
7-BSM0806F	8	6
7-BSM0807F	8	7
7-BSM0808F	8	8
7-BSM0809F	8	9
7-BSM0810F	8	10
7-BSM0812F	8	12
7-BSM1004F	10	4
7-BSM1005F	10	5
7-BSM1006F	10	6
7-BSM1007F	10	7
7-BSM1008F	10	8
7-BSM1009F	10	9
7-BSM1010F	10	10
7-BSM1012F	10	12

Niti-S S Partiellt täckt för kort system Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm		
Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BSM0604B	6	4
7-BSM0605B	6	5
7-BSM0606B	6	6
7-BSM0607B	6	7
7-BSM0608B	6	8
7-BSM0609B	6	9
7-BSM0610B	6	10
7-BSM0612B	6	12
7-BSM0804B	8	4
7-BSM0805B	8	5
7-BSM0806B	8	6
7-BSM0807B	8	7
7-BSM0808B	8	8
7-BSM0809B	8	9
7-BSM0810B	8	10
7-BSM0812B	8	12
7-BSM1004B	10	4
7-BSM1005B	10	5
7-BSM1006B	10	6
7-BSM1007B	10	7
7-BSM1008B	10	8
7-BSM1009B	10	9
7-BSM1010B	10	10
7-BSM1012B	10	12

Finns att tillgå som heltäckt och otäckt. Samt som partiellt täckt där 5 mm av respektive ända är otäckt. Standardmodellen är heltäckt med silikontäckning.

Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande. För kort system finns även att beställa till långt system. Röntgentäta markeringar 3-2-3.



Stent-by-stent

6 och 7 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S M

M står för “Mixed type” och har designats utifrån att stentet ska fungera vid Stent-by-Stent placering i hilus.

Det levereras med ett 6 fr leveranssystem, vilket gör att båda systemen kan föras in simultant genom duodenoskopet. Taewoong rekommenderar att man placerar och öppnar dem simultant.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Finns även att beställa med ett 7 fr leveranssystem.






Niti-S M Otäckt för "stent by stent"

Leveranssystem 6 fr, 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BN0604-6	6	4
7-BN0605-6	6	5
7-BN0606-6	6	6
7-BN0607-6	6	7
7-BN0608-6	6	8
7-BN0609-6	6	9
7-BN0610-6	6	10
7-BN0612-6	6	12
7-BN0804-6	8	4
7-BN0805-6	8	5
7-BN0806-6	8	6
7-BN0807-6	8	7
7-BN0808-6	8	8
7-BN0809-6	8	9
7-BN0810-6	8	10
7-BN0812-6	8	12

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Finns även att beställa med ett 7 fr leveranssystem.

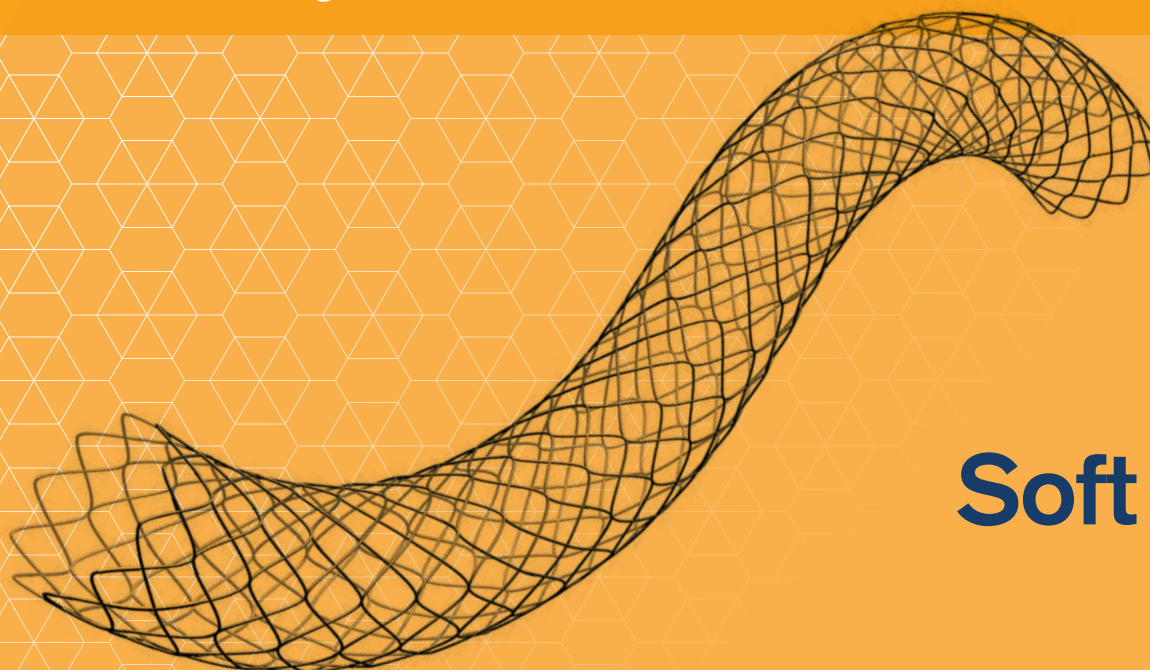

Soft Axial

8,5 fr

Maligna strikturer


Niti-S D

D-modellen har en mindre axiell kraft än S-typen vilket gör att den adapterar mycket väl till anatomin i gallvägarna. D-typen är otäckt för malign indikation.


Designen ger stentet en optimal kombination av radiell kraft med mindre axiell kraft än S-typen.

För kort system finns även att beställa till långt system.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

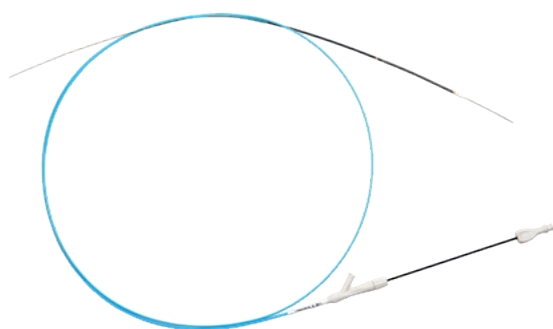

Leveranssystem "gallväg kort system".

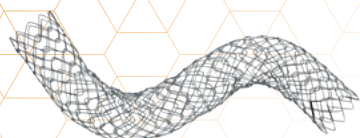**Niti-S D****Otäckt för kort system**

Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BDM0604	6	4
7-BDM0605	6	5
7-BDM0606	6	6
7-BDM0607	6	7
7-BDM0608	6	8
7-BDM0609	6	9
7-BDM0610	6	10
7-BDM0612	6	12
7-BDM0804	8	4
7-BDM0805	8	5
7-BDM0806	8	6
7-BDM0807	8	7
7-BDM0808	8	8
7-BDM0809	8	9
7-BDM0810	8	10
7-BDM0812	8	12
7-BDM1004	10	4
7-BDM1005	10	5
7-BDM1006	10	6
7-BDM1007	10	7
7-BDM1008	10	8
7-BDM1009	10	9
7-BDM1010	10	10
7-BDM1012	10	12

För kort system finns även att beställa till långt system.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Triple Layer

8,5 fr

Benigna och maligna strikturer

Niti-S COMVI


COMVI består av tre lager. Två lager metallväv av D-typ med ett membran av Teflon mellan. Anledningen till att man valt teflon (PTFE) är att det står emot erosionen från gallan betydligt bättre än vad silikon gör.

Designen har kommit till utifrån att man vill kunna tillhandahålla en stent vid strikturer i gallvägar och pankreas som tål att sitta längre utan vävnadsinväxt än vad en otäckt stent kan erbjuda eller ett stent med silikon.



Den yttre väven ökar friktionen mot vävnaden vilket gör att stentet sitter bättre.

Designen ger en minimal förkortning vid placering.

Utifrån D-typen anpassar sig stentet väl till anatomin.

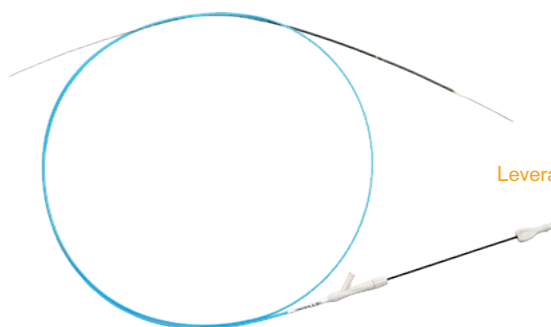

Leveranssystem "gallväg kort system".

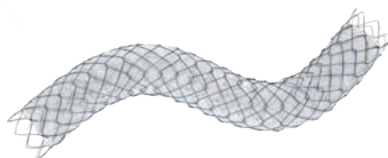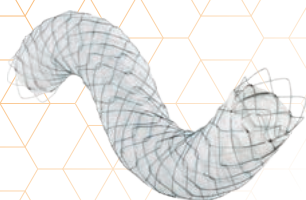

Niti-S COMVI
Heltäckt för kort system
Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm


Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BCM0604F	6	4
7-BCM0605F	6	5
7-BCM0606F	6	6
7-BCM0607F	6	7
7-BCM0608F	6	8
7-BCM0609F	6	9
7-BCM0610F	6	10
7-BCM0612F	6	12
7-BCM0804F	8	4
7-BCM0805F	8	5
7-BCM0806F	8	6
7-BCM0807F	8	7
7-BCM0808F	8	8
7-BCM0809F	8	9
7-BCM0810F	8	10
7-BCM0812F	8	12
7-BCM1004F	10	4
7-BCM1005F	10	5
7-BCM1006F	10	6
7-BCM1007F	10	7
7-BCM1008F	10	8
7-BCM1009F	10	9
7-BCM1010F	10	10
7-BCM1012F	10	12

Niti-S COMVI
Partiellt täckt för kort system
Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BCM0604B	6	4
7-BCM0605B	6	5
7-BCM0606B	6	6
7-BCM0607B	6	7
7-BCM0608B	6	8
7-BCM0609B	6	9
7-BCM0610B	6	10
7-BCM0612B	6	12
7-BCM0804B	8	4
7-BCM0805B	8	5
7-BCM0806B	8	6
7-BCM0807B	8	7
7-BCM0808B	8	8
7-BCM0809B	8	9
7-BCM0810B	8	10
7-BCM0812B	8	12
7-BCM1004B	10	4
7-BCM1005B	10	5
7-BCM1006B	10	6
7-BCM1007B	10	7
7-BCM1008B	10	8
7-BCM1009B	10	9
7-BCM1010B	10	10
7-BCM1012B	10	12

För kort system finns även att beställa till långt system.

Röntgentäta markeringar 4 i vardera änden.

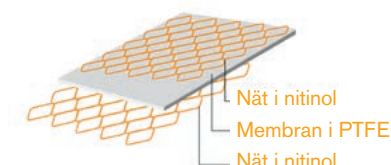



Benigna och maligna strikturer

Niti-S BUMPY

BUMPY har designats för att medge till ett optimalt flöde utanför stentet, t.ex. från d.cysticus eller i pankreas. Stentet har en irreguljär yta med små variationer i diametern utifrån att man har vävt stentet med olika stora "celler".


Stentet är heltäckt med PTFE centralt och silikon i ändarna.

De distala ändarna har en konisk form med större diameter än resten av stentet för att det ska ligga stabilare på plats.

För kort system finns även att beställa till långt system.

Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

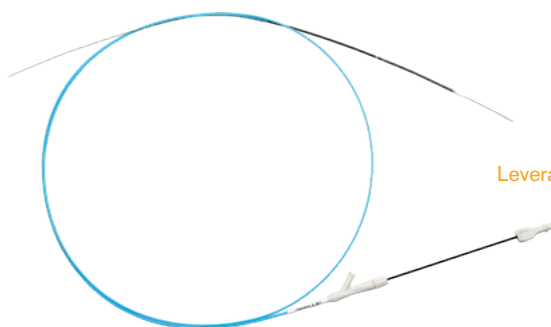

Leveranssystem "gallväg kort system".



Niti-S BUMPY
Heltäckt för kort system
 Leveranssystem 8,5 fr, 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BKM0604CW	6	4
7-BKM0605CW	6	5
7-BKM0606CW	6	6
7-BKM0607CW	6	7
7-BKM0608CW	6	8
7-BKM0609CW	6	9
7-BKM0610CW	6	10
7-BKM0612CW	6	12
7-BKM0804CW	8	4
7-BKM0805CW	8	5
7-BKM0806CW	8	6
7-BKM0807CW	8	7
7-BKM0808CW	8	8
7-BKM0809CW	8	9
7-BKM0810CW	8	10
7-BKM0812CW	8	12
7-BKM1004CW	10	4
7-BKM1005CW	10	5
7-BKM1006CW	10	6
7-BKM1007CW	10	7
7-BKM1008CW	10	8
7-BKM1009CW	10	9
7-BKM1010CW	10	10
7-BKM1012CW	10	12

För kort system finns även att beställa till långt system.


Den proximala änden har en tråd för enkelt borttagande.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Benigna och maligna strikturer


Niti-S Alternativ

Vi har också några alternativ som vi inte lagerför då de inte finns att tillgå för kort system, men som finns att beställa.

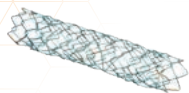

Niti-S LCD

"Large Cell Design" (6 mm mellan knutarna i längdled) för Stent-in-Stent positionering. Stentet ger en låg axiell kraft men god radiell kraft.

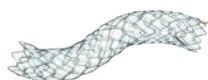

När första stentet placerats förs det andra in igenom stentets väv och in i nästa gallgång därmed får man "stent-in-stent".

6 fr leveranssystem underlättar för metoden. Finns även att beställa med 7 och 8 fr leveranssystem. Röntgentäta markeringar 3-2-3. Ej för kort system.



Niti-S FLARE

Har S-design och är heltäckt med silikon. I distala delen har den en konisk form för att minska risken för migration. Den proximala delen ligger i duodenum då en större krage gör att stentet inte kan migrera in i d.choledochus.

Röntgentäta markeringar 3-2-3. Ej för kort system.



Niti-S KAFFES

Ett kortare stent med en lång och röntgentät tråd i platina för borttagande. Indikationen är strikturer som uppstår efter levertransplantation ovan d.cysticus där stentet placeras för att inte hindra flödet ut från gallblåsan. Den kortare designen medger också till ett minskat tryck mot vävnaden som inte ligger i anslutning till strikturen.

Stentet har också en tydlig midja vilket ger det en hög radiell kraft samt ökad friktion i ändarna för att förhindra migration.

Röntgentäta markeringar 3-2-3. Ej för kort system.

Något du undrar över?

0159-120 20 eller order@kungshusen.se
www.kungshusen.se



Hot Spaxus LAMS

10fr

EUS-guidad dränering

Niti-S Hot Spaxus

Indikationer

Spaxusstentet används vid dränering av pseudocystor eller gallblåsan med transgastrisk eller transduodenal approach. Stentet positioneras med hjälp av EUS och genomlysning.

Funktioner leveranssystemet

Vårt Hot Spaxus-stent har i denna version en spets på leveranssystemet med en diatermi-elektrod som är utformad för att tränga in i målorganets vävnad. Genom att koppla Hot Spaxus direkt till diatermiapparaten slipper man användandet av ett cystotom. Leveranssystemet har ett antal markeringar som guidar skopisten genom den endoskopiska bilden.

Stentets Funktioner

Spaxusstentet är ett heltäckt stent som via sin design kan dränera innehållet från ett organ till ett annat. Kragarnas utformning motverkar migration och upprätthållandet av organens inbördes position i förhållande till varandra. Stentets totala längd är 20 mm och avståndet mellan insidan av respektive krage är 7 mm.

Positionering

Hot Spaxus används tillsammans med ett terapeutiskt EUS-endoskop med en arbetskanal som är 3,7 mm eller större. Även genomlysning kan användas för att bekräfta stentets position vid öppnandet i cystan eller gallblåsan.


Niti-S HOT SPAXUS**EUS heltäckt**

Leveranssystem 10fr, 180cm


Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Diam, krage (mm)
7-HSS0802FW	8	2	23
7-HSS1002FW	10	2	25
7-HSS1602FW	16	2	31




Stentet är 2cm långt oavsett diameter. De väl tilltagna kragarna är utvecklade för att minimera risken för migration. Själva stentet har röntgentäta markeringar: Tre på vardera sida samt två i mitten.

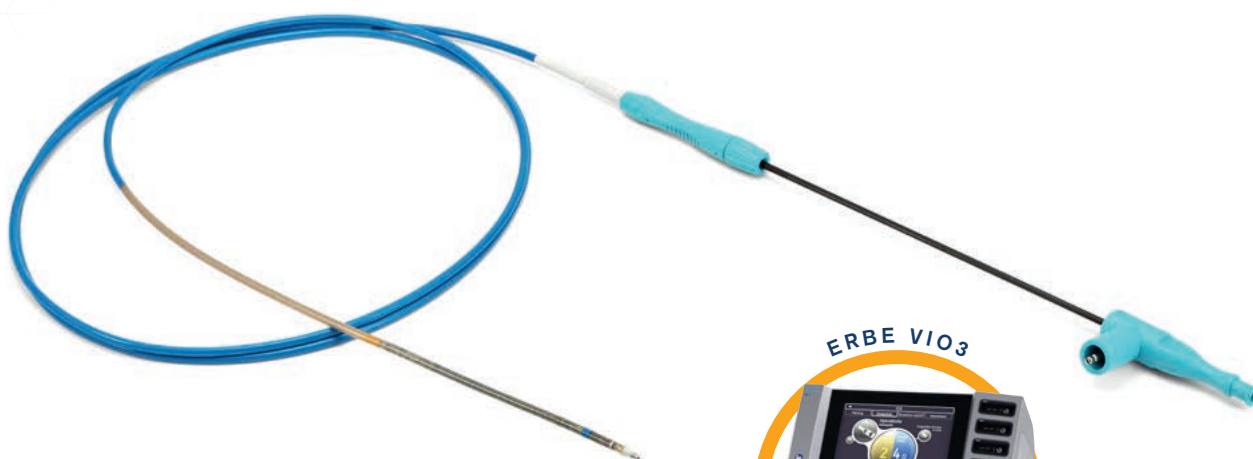

Koppla din HotSpaxus till diatermiapparaten.

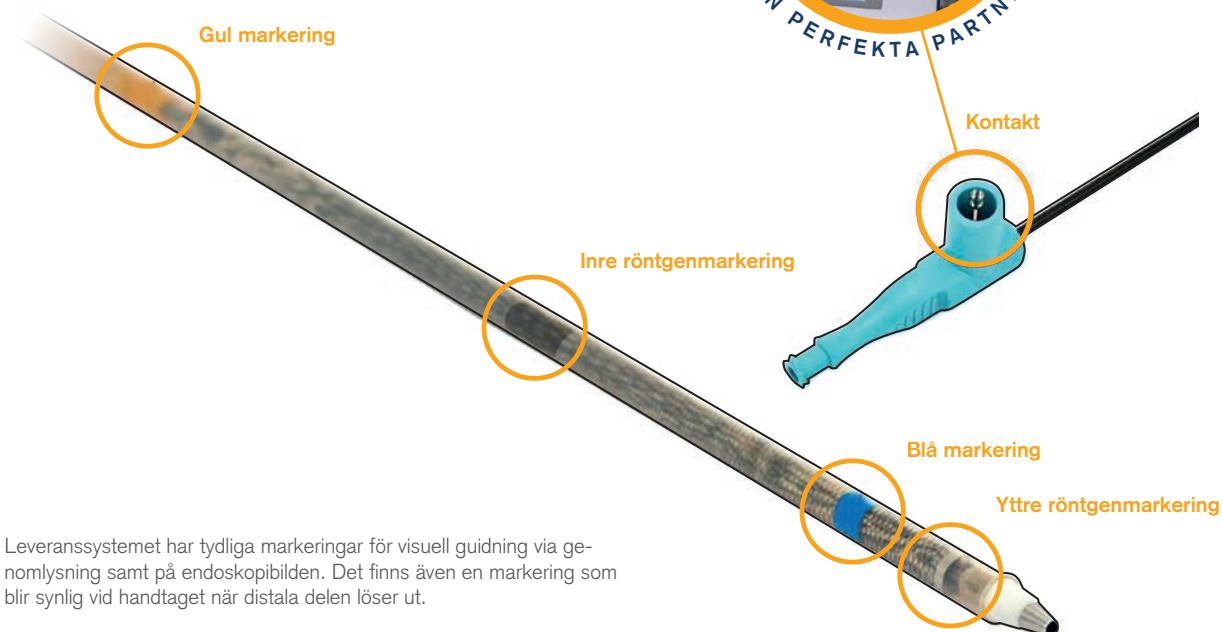

Leveranssystemet har tydliga markeringar för visuell guidning via genomlysning samt på endoskopibilden. Det finns även en markering som blir synlig vid handtaget när distala delen löser ut.

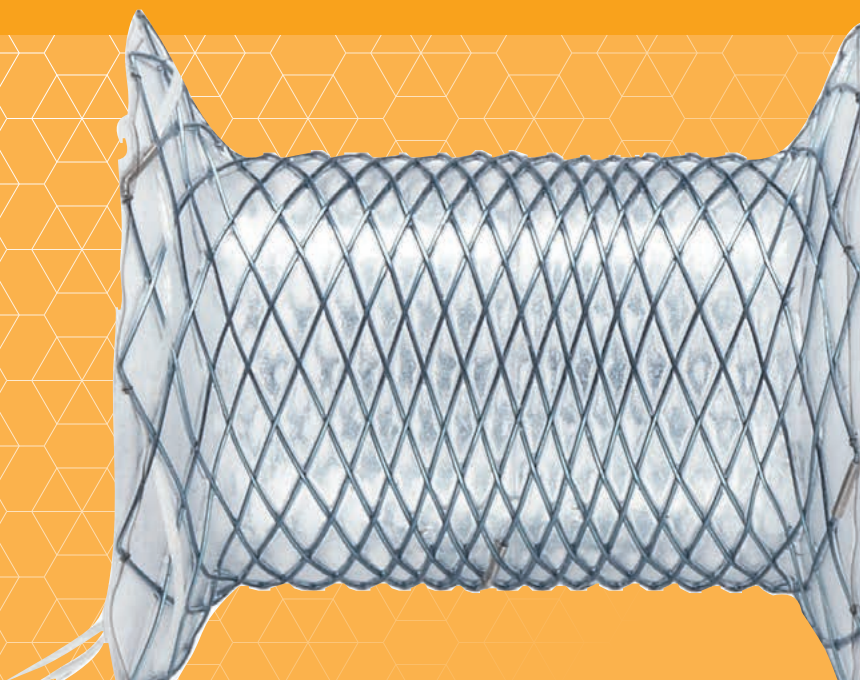

Dränage

9 och 10 fr

Dränage av pseudocystor

Niti-S NAGI

NAGI positioneras med hjälp av EUS och genomlysning. Stentet kommer i ett flertal olika kombinationer av längd/diameter.

Kragen i båda ändar har en mjuk design med en väl tilltagen diameter i förhållande till resten av stentet för att minimera risken för att stentet migrerar.

NAGI har röntgentäta markeringar. 3 st i vardera ände samt 2 st i mitten av stentet.



Niti-S NAGI EUS**EUS heltäckt**

Leveranssystem 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-BS1001FW	10	1	9
7-BS1002FW	10	2	9
7-BS1003FW	10	3	9
7-BS1201FW	12	1	9
7-BS1202FW	12	2	9
7-BS1203FW	12	3	9
7-BS1402FW	14	2	10
7-BS1403FW	14	3	10
7-BS1602FW	16	2	10
7-BS1603FW	16	3	10



Hepatikogastrostomi

9 och 10 fr

Malign obstruktion av gallflöde

Niti-S GIOBOR

Giobor är ett gallvägsstent som positioneras med hjälp av EUS för att skapa en hepatikogastrostomi.

70% av stentet är täckt för att motverka läckage av galla mellan levern och ventrikeln.

30% av stentet är inte täckt för att inte obstruera gallflödet från gallgångarna när stentet ligger på plats i levern.

Giobor har en väl tilltagen krage för att förhindra migration ut från ventrikeln.

Röntgenmarkeringar. Tre markeringar i vardera ände. Två markeringar i övergången mellan täck och otäckt del.



Niti-S GIOBOR Hepatikogastrostomi**EUS Partiellt täckt**

Leveranssystem 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-BS0808FP	8	8	8,5
7-BS0810FP	8	10	8,5
7-BS1008FP	10	8	8,5
7-BS1010FP	10	10	8,5

Maligna strikturer

10,5 fr

För maligna strikturer i colon

Niti-S COMVI • COMVI Flare


Vårt COMVI-stent har en speciell konstruktion med sina tre lager. Mellan de två lagren av metallväv ligger ett teflonmembran för att förhindra vävnadsinväxt.


Det speciella med COMVI är smidigheten och flexibiliteten när högre krav ställs på anpassning till anatomic. De två skikten med väv gör att stentet håller en hög radiell kraft. Designen ger en minimal förkortning mellan stentets längd på leveranssystemet och när det ligger på plats i colon.

COMVI är partiellt täckt där båda ändarna är otäckt. De fyra röntgentäta markeringarna sitter där den täckta delen övergår i otäckt i vardera ände.

COMVI Flare har en förlängd otäckt krage i proximala änden, distala änden är heltäckt. COMVI Flare kommer i diametrar upp till 26 mm. De röntgentäta markeringarna är positionerade med 3 st i kragens slut samt 2 st i vardera ände av den täckta delen.

Vårt leveranssystem till TTS är mycket smidigt att arbeta med och kommer i 220 cm längd samt 10,5 fr. Vilket kräver en arbetskanal på koloskopet om minst 3,7 mm.

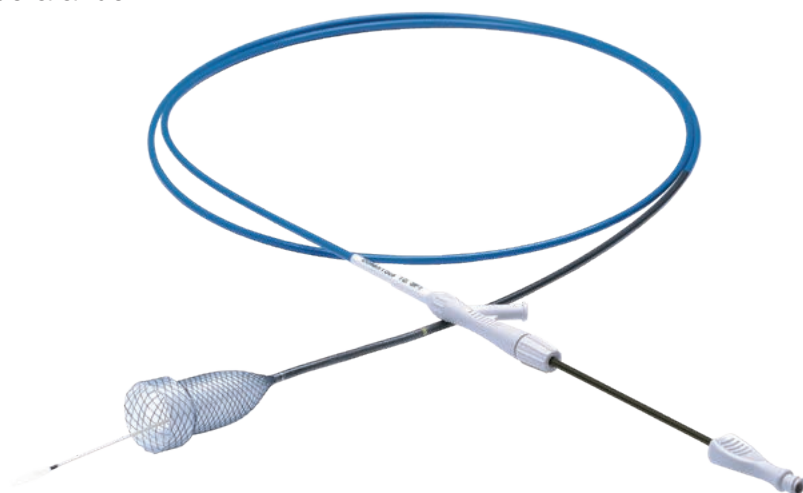

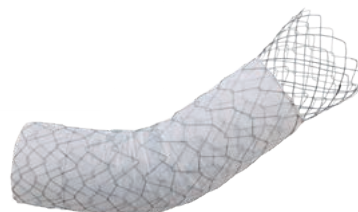**Niti-S COMVI Partiellt täckt****Through the Scope**


Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CCT1806BA	18	6	10,5
7-CCT1808BA	18	8	10,5
7-CCT1810BA	18	10	10,5
7-CCT1812BA	18	12	10,5
7-CCT2006BA	20	6	10,5
7-CCT2008BA	20	8	10,5
7-CCT2010BA	20	10	10,5
7-CCT2012BA	20	12	10,5
7-CCT2206BA	22	6	10,5
7-CCT2208BA	22	8	10,5
7-CCT2210BA	22	10	10,5
7-CCT2212BA	22	12	10,5

Niti-S COMVI Flare Partiellt täckt**Through the Scope**

Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CCT1806P	18	6	10,5
7-CCT1806P	18	8	10,5
7-CCT1806P	18	10	10,5
7-CCT1806P	18	12	10,5
7-CCT1806P	20	6	10,5
7-CCT1806P	20	8	10,5
7-CCT1806P	20	10	10,5
7-CCT1806P	20	12	10,5
7-CCT2206P	22	6	10,5
7-CCT2208P	22	8	10,5
7-CCT2210P	22	10	10,5
7-CCT2212P	22	12	10,5
7-CCT2406P	24	6	10,5
7-CCT2408P	24	8	10,5
7-CCT2410P	24	10	10,5
7-CCT2412P	24	12	10,5
7-CCT2606P	26	6	10,5
7-CCT2608P	26	8	10,5
7-CCT2610P	26	10	10,5
7-CCT2612P	26	12	10,5

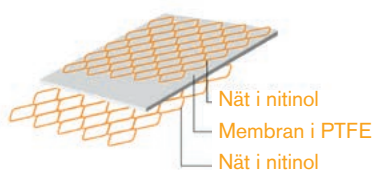



Maligna strikturer

10,5fr

För maligna strikturer i colon


Niti-S S

Med vårt S-stent finns möjligheten att arbeta med ett colonstent som kan appliceras TTS (Through The Scope). Stentet kommer i en partiellt täckt version, där båda ändarna är otäckta. Vårt S-stent har en hög radiell kraft samtidigt som det är flexibelt. I vardera ände är stentet avrundat för att vara skonsamt samt minimera risken för vävnadshyerplasi och inväxt.

Stentet har en grön tråd för att förenkla eventuell repositionering. Röntgentäta markeringar finns med fyra i vardera ände samt två i mitten.

Vid behov kan heltäckta eller otäckta stent beställas. Kontakta våra produktspecialister för mer information.

Vårt leveranssystem till TTS är mycket smidigt att arbeta med och kommer i 220cm längd samt 10,5fr. Vilket kräver en arbetskanal på koloskopet om minst 3,7 mm.

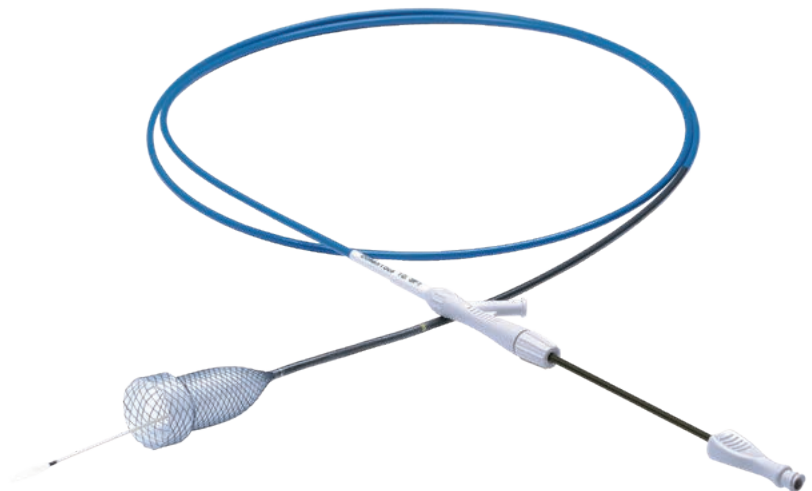

**Niti-S S partiellt täckt****Through the Scope**

Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CST1806B	18	6	10,5
7-CST1808B	18	8	10,5
7-CST1810B	18	10	10,5
7-CST1812B	18	12	10,5
7-CST1814B	18	14	10,5
7-CST1815B	18	15	10,5
7-CST2006B	20	6	10,5
7-CST2008B	20	8	10,5
7-CST2010B	20	10	10,5
7-CST2012B	20	12	10,5
7-CST2014B	20	14	10,5
7-CST2015B	20	15	10,5
7-CST2206B	22	6	10,5
7-CST2208B	22	8	10,5
7-CST2210B	22	10	10,5
7-CST2212B	22	12	10,5
7-CST2214B	22	14	10,5
7-CST2215B	22	15	10,5